



超音波画像診断装置

FC1-X

バスキュラーアクセス

血管評価と管理を行うため、進化を遂げた「FC1-X」

従来から定評のあった画像描出力や、直感的な操作を可能にするユーザーインターフェースを強化。さらに操作が簡単になりました。

約**5kg**※

コンパクトなボディ
※バッテリーを含まず

12.1
インチ

全画面表示が可能

約**30**秒
高速起動

バッテリー
駆動


電源がない環境や
頻繁な移動に

FUJIFILM
Value from Innovation

Medtronic
Further, Together

NEW Full Auto Volume Flow (血流量自動計測)


前バージョン搭載のAuto Volume Flowの操作ステップを、より削減したFull Auto Volume Flow。
機器操作ステップを減らすことで、検査側のプローブ手振れの割合が低くなり、検査中のストレス軽減につながります。

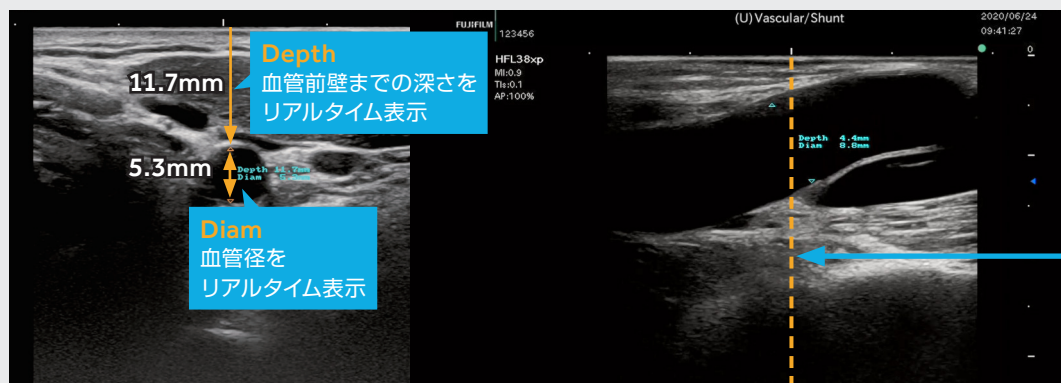

中央ラインで
ブルーマーカーが
血管を認識すると
2秒で自動計測完了。




血管認識完了

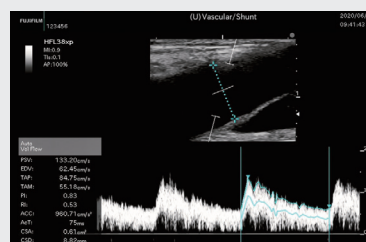


計測完了

NEW F-flow (血流イメージング機能)

パワードプラ処理を一新したことで、低速血流を拾い上げ、信号のはみだしをおさえる処理を導入。
高精細なドプラ画像を実現しました。

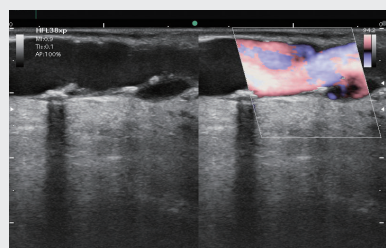

狭窄した細い血管を表示

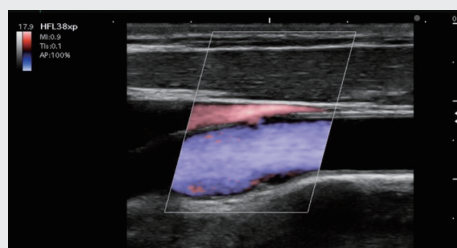

太い血管を表示

3フィート (91.4cm) からの落下試験をクリアし、
落下・振動に対して優れた耐久性を有するSonoSite
ブランドのプローブを接続可能。安心してお使い
いただけます。



HFL38xp/13-6



L25xp/13-6

[FC1-X] 販売名: FCシリーズ 医療機器認証番号: 226AABZI00003000
[HFL38xp] 販売名: SonoSite X-Porteシリーズ 医療機器認証番号: 225ADBZI00146000
[L25xp] 販売名: SonoSite X-Porteシリーズ 医療機器認証番号: 225ADBZI00146000

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意点等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

Medtronic

販売業者
コヴィディエンジャパン株式会社

Tel : 0120-998-971

medtronic.co.jp

FUJIFILM

選任製造販売業者
富士フイルムメディカル株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士フイルム西麻布ビル
TEL : 03-6419-8050 (代)

RCS2020-19
mt-ot-fcv4
2012.5000.SHO