

閉塞リスクの軽減と  
高い視認性を持つ  
**ユニークな先端形状**



**Palindrome™**

Palindrome Precision Dialysis Catheter

**Medtronic**



Palindrome Precisionカテーテルのユニークな先端形状は、透析治療中の安定した血流を確保し、安全なカテーテル留置をサポートします。


## Palindrome™ Precision カテーテル

### 左右対称な先端形状

透析治療期間中の継続した血流確保を促進し、体位による閉塞リスクを低減します。

### レーザー加工の側孔


カテーテルに流入する血流抵抗の軽減が期待できます。

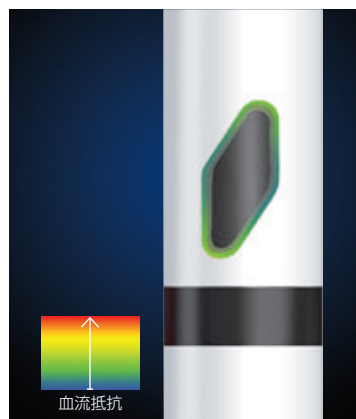



## マーカerbバンド

X線不透過性マーカerbバンドにより、X線透視下において、カテーテルの先端を確認することができ、また、右心房近合部におけるカテーテル先端位置を確認することを容易にします。

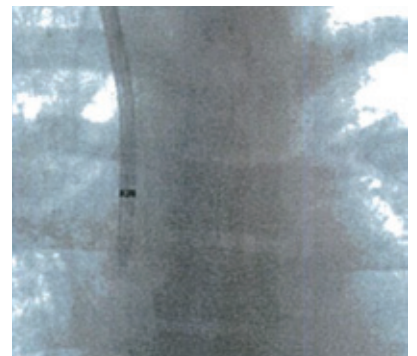

## 耐キック性に優れたポリウレタン製カテーテル

柔軟性および耐キック性に優れたポリウレタン素材を採用することで、広い内腔設計ができ、一貫して高い流量の確保が可能です。



## セルジンガータイプ (スタイレット付)

セルジンガータイプ (スタイレット付) は、スタイレットを使用することでセルジンガー式の挿入が可能になります。シース挿入との比較において、このユニークな設計は、空気塞栓のリスクを低減します。



# Palindrome™ Precision カテーテル

## スタンダードタイプ

カタログ番号	タイプ	有効長(cm)	全長(cm)	包装単位
8888145014P	スタンダードタイプ	19	36	5キット/箱
8888145015P		23	40	5キット/箱
8888145016P		28	45	5キット/箱
8888145017P		33	50	5キット/箱

包装:1キット毎滅菌済 カテーテル材質:医療用ポリウレタン



スタンダードタイプ


### キット内容

- カテーテル (14.5Fr)
- ガイドワイヤ J/ストレート 0.038インチ
- 12Fr拡張ダイレクタ
- キャップ×2
- トンネラ
- 14Fr拡張ダイレクタ
- 穿刺針18G
- シースイントロデューサ16Fr
- シリンジ 12mL
- ドレッシング
- ガーゼ 4インチ×4
- スカルペル

## セルジンガータイプ(スタイレット付)

カタログ番号	タイプ	有効長(cm)	全長(cm)	包装単位
8888145039P	セルジンガータイプ	19	36	5キット/箱
8888145040P		23	40	5キット/箱
8888145041P		28	45	5キット/箱
8888145042P		33	50	5キット/箱

包装:1キット毎滅菌済 カテーテル材質:医療用ポリウレタン

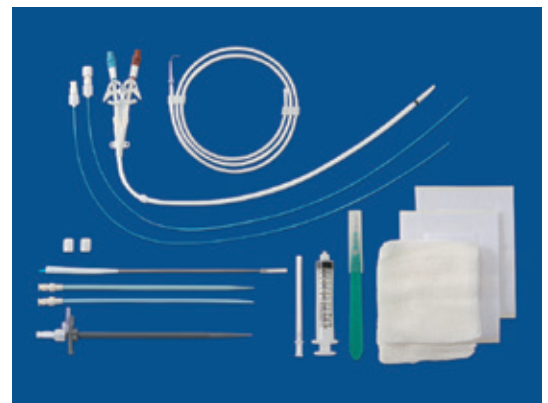

セルジンガータイプ

### キット内容

- カテーテル (14.5Fr)
- ガイドワイヤ J/ストレート 0.038インチ
- 12Fr拡張ダイレクタ
- スタイレット
- 14Fr拡張ダイレクタ
- キャップ×2
- トンネラ
- シリンジ 12mL
- 穿刺針18G
- シースイントロデューサ16Fr
- スカルペル
- ドレッシング
- ガーゼ 4インチ×4

#### 製品規格

一般の名称:緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル  
販売名:パルンドローム プレシジョン  
医療機器承認番号:22700BZX00227000  
クラス分類:Ⅲ 高度管理医療機器

# Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

お問い合わせ  
0120-998-971

[medtronic.co.jp](http://medtronic.co.jp)

ct-dv-pldm  
1810.5000.SHO