

CATÁLOGO DE PRODUCTO **ARGYLE™** PARA DIÁLISIS PERITONEAL



Argyle™
Familia de Catéteres
para Diálisis Peritoneal



Medtronic
Juntos, Más Lejos



LA DIÁLISIS
ES CRÍTICA.
LA LIBERTAD
ES ESENCIAL.

Guía para Pedido de Catéteres 05-06

Catéteres Peritoneales Tenckhoff 07-08

1 cojinete	07
2 cojinetes	08
Pediátricos	08

Catéteres Peritoneales Cuello de Cisne 09

Catéteres Peritoneales Tenckhoff Cuello de Cisne	09
--	----

Catéteres Peritoneales Cola de Cochino 10-12

Catéter Cola de Cochino	10
1 cojinete	11
2 cojinetes	12
Pediátrico	12

Catéteres Peritoneales Cuello de Cisne Cola de Cochino 13

Pediátricos	13
-------------	----

Accesorios para Catéteres Peritoneales 14-15

Los catéteres y productos que aparecen en este catálogo pueden ser ordenados tanto en la configuración de catéter individual como en kit.

LA CONFIGURACIÓN DE CATÉTER INDIVIDUAL INCLUYE:

- Contenido Estéril:
- (1) Catéter Peritoneal
 - (1) Adaptador Beta-Cap
 - (1) Pinza Beta-Cap
 - (1) Tapón

Si ordena únicamente un catéter, puede comprar también los siguientes accesorios:

Accesorios para catéter individual:

Set introductor 16 Fr con PTFE*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8815544010	(1) Dilatador† Pull-Apart 16 Fr	5
	(1) Aguja Introdutora 18 G	
	(1) Jeringa 12 ml	
	(1) Guía de Alambre J / Recto 0.038"	

† PoliTetra FluoroEtileno (PTFE)

* Sujeto a disponibilidad

Estilete tunelizador estéril (elegir un estilete por catéter)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888415679	Estilete tunelizador Faller	1

Estilete enderezador, No estéril, Autoclavable (elegir un estilete por catéter)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888415646	Estilete de inserción, 44.5 cm	1
8888415661	Estilete de inserción, 61 cm	1

Plantilla para Catéter Cuello de Cisne (elegir uno en caso de ordenar catéter cuello de cisne)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888412304	Plantilla para Catéter Tenckhoff Cuello de Cisne, 2 cojinetes, izquierdo/derecho	1

LA CONFIGURACIÓN DE KIT INCLUYE:

Contenido Estéril:

- (1) Catéter Peritoneal
- (1) Adaptador Beta-Cap, Tapa y Pinza
- (1) Dilator† Pull-Apart 16 Fr
- (1) Aguja Introdutora 18 G
- (1) Guía de alambre J / Recto
- (1) Jeringa 12 ml
- (1) Bisturí #11
- (1) Estilete Tunelizador
- (1) Esponjas de Gasa

† PoliTetra FluoroEtileno (PTFE)

Los kits para catéteres peritoneales son convenientes y costo-efectivos. Los kits simplifican el inventario y ahorran el tiempo que el equipo requiere para la organización de consumibles necesarios para la inserción del catéter. Los kits para catéteres peritoneales se recomiendan para colocación percutánea del catéter. El kit para catéter peritoneal ofrece una alternativa a la colocación del catéter por laparotomía. Cada kit contiene un introductor Pull-Apart 16 Fr utilizado para la inserción percutánea del catéter usando la técnica de Seldinger. modificada Esta técnica emplea una incisión más pequeña, ayudando a minimizar el riesgo post- operatorio de fuga del dialisado.

Si ordena un kit, puede comprar también los siguientes accesorios:

Accesorios para kit:


Estilete enderezador (elegir un estilete por catéter)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888415646	Estilete de inserción, 44.5 cm	1
8888415661	Estilete de inserción, 61 cm	1

Plantilla para Catéter Cuello de Cisne (elegir uno en caso de ordenar catéter cuello de cisne)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888412304	Plantilla para Catéter Tenckhoff Cuello de Cisne, 2 cuffs, izquierdo/derecho	1

Catéteres Peritoneales Tenckhoff

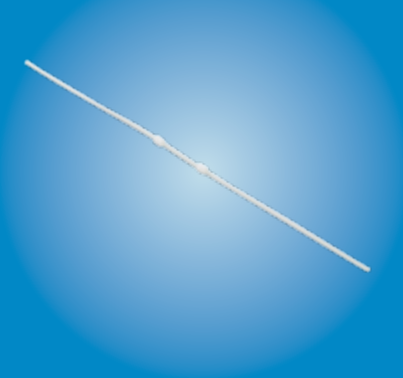


CATÉTERES PERITONEALES ARGYLE™ TENCKHOFF

Amplia selección: Elija entre una variedad de largos de catéter, colocación de cojinetes y tipos, o elija el catéter universal Argyle Tenckhoff - un catéter único que puede ser cortado para ajustarse a la mayoría de los pacientes. El catéter Tenckhoff se ofrece en las siguientes configuraciones de acuerdo al cojinete:


- Un cojinete fijo - ya sea en posición subcutánea o preperitoneal
- Dos cojinetes fijos - uno subcutáneo y uno preperitoneal

Catéteres Tenckhoff - Un Cojinete


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8814843001	Catéter Tenckhoff, 1 Cojinete Preperitoneal, 41 cm	1

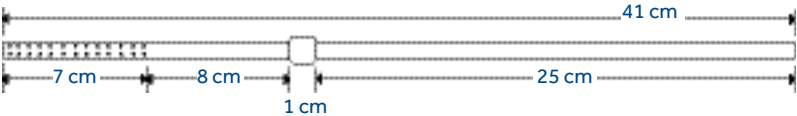

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8810889003	Catéter Tenckhoff, 1 Cojinete Subcutáneo, 42 cm	1

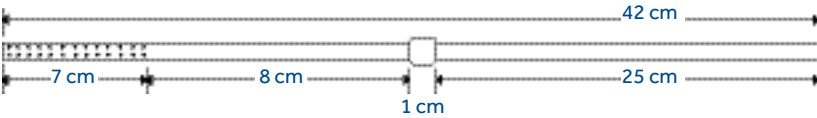


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8814843002	Catéter Tenckhoff Universal, 1 Cojinete Preperitoneal, 46 cm	1
Kit	8817278001	Kit Catéter Tenckhoff Universal, Cojinete Preperitoneal, 46 cm	5

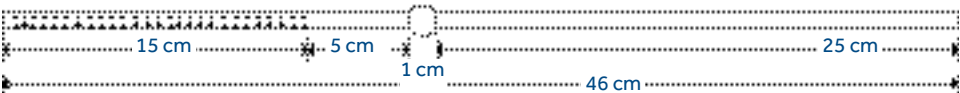


Catéteres Tenckhoff - Dos Cojinetes


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8810888003	Catéter Tenckhoff, 2 Cojinetes , 42 cm	1
Kit	8817278008	Kit Catéter Tenckhoff, 2 Cojinetes , 42 cm	5

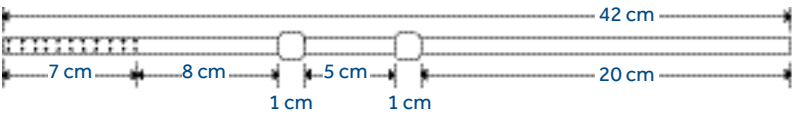


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8810888012	Catéter Tenckhoff Universal, 2 Cojinetes, 47 cm	1

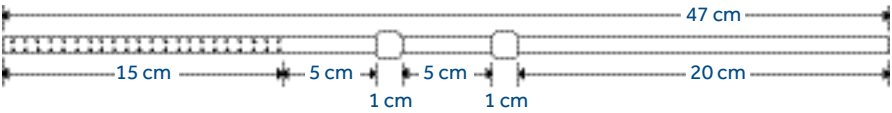


Catéteres Tenckhoff Pediátricos

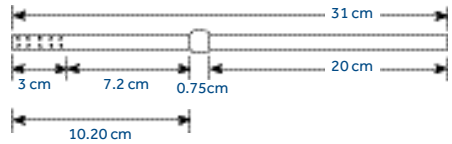


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8812329001	Tenckhoff Pediátrico, 1 Cojinete Subcutáneo, 31 cm	1

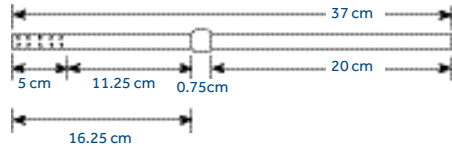


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8812321001	Tenckhoff Pediátrico, 1 Cojinete Subcutáneo, 37 cm	1

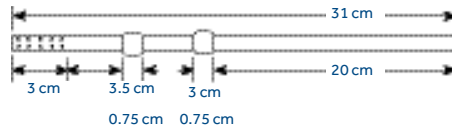

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8812329002	Tenckhoff Pediátrico, 2 Cojinetes, 31 cm	1

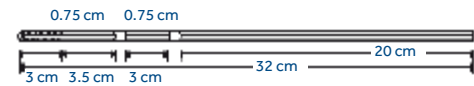

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8810890014	Tenckhoff Pediátrico, 2 Cojinetes, 32 cm	1

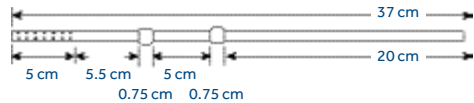

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8810890003	Tenckhoff Pediátrico, 2 Cojinetes, 37 cm	1

Catéteres Peritoneales Cuello de Cisne




Amplia selección: Elija entre una variedad de opciones: Tenckhoff, Cola de Cochino y Pediátricos.

- El Catéter Cuello de Cisne emplea un ángulo pre-formado de 180° diseñado para mantener las secciones tanto interna como externa del catéter posicionadas hacia abajo. El catéter angulado tiene como objetivo evitar la migración de la sección interna y disminuir el estrés en el sitio de salida, que ocurre generalmente cuando se curva manualmente un catéter recto.
- Los cojinetes de fieltro anclan el catéter subcutáneamente y ayudan a establecer una barrera natural a infección a través del crecimiento de tejido.
- Una banda radiopaca en el frente de cada catéter facilita la identificación con rayos-x.
- Durante la inserción y periodo post-colocación. La banda ayuda a identificar acodamientos del catéter.
- Las plantillas estás disponibles para marcar la piel antes de la cirugía. Cada plantilla refleja la forma exacta del catéter y es crítico para asegurar la colocación adecuada del catéter.

Catéteres Tenckhoff Cuello de Cisne Pediátricos

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8888410506	Catéter Tenckhoff Cuello de Cisne Pediátrico, 2 Cojinetes, Izq, 37.5 cm	1

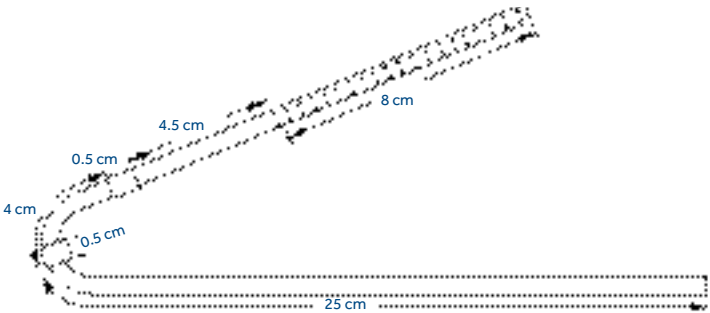

Catéteres Peritoneales Cola de Cochino



RECOMENDADO PARA DIÁLISIS PERITONEAL

Características

El catéter Cola de Cochino, una versión modificada del catéter Tenckhoff, es adecuado para diálisis peritoneal aguda o crónica. Puede ser colocado tanto percutáneamente como quirúrgicamente.

La masa adicional del catéter Cola de Cochino lo mantiene en la parte inferior del canal pélvico, evitando la migración del catéter.

El tubo en forma de espiral y los numerosos agujeros de entrada y salida difunden el dialisado gentilmente en el paciente.

El catéter Cola de Cochino está hecho de silicón translúscido grado médico con una banda radiopaca. Tiene un diámetro externo de 4.9 mm e interno de 2.6 mm, y está disponible en longitudes para adulto o pediátricas. A diferencia de los catéteres de poliuretano, el Cola de Cochino puede extenderse o repararse en caso de ser necesario, evitando la necesidad de recolocación del catéter.

Los cojinetes de fieltro anclan el catéter percutáneamente y ayudan a establecer una barrera natural contra infecciones a través del crecimiento del tejido. Para cubrir las distintas necesidades del paciente y el médico, ofrecemos dos configuraciones de cojinetes:

- Un cojinete fijo - en la posición preperitoneal
- Dos cojinetes fijos - uno subcutáneo y uno peroperitoneal

El adaptador Ultem™† incluido en el empaque provee un ajustado cierre con sets de transferencia estándar CAPD. Los adaptadores de titanio también están disponibles.


† Fabricado con PoliTetra FluoroEtileno (PTFE)

Aspectos destacados


- Tubo en forma de espiral con agujeros para entrada y salida de flujo
- Puede ser colocado tanto percutáneamente como quirúrgicamente
- Fabricado de silicón translúscido grado médico
- Banda radiopaca
- Estéril

Catéteres Cola de Cochino - 1 Cojinete

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8811313014	Catéter Cola de Cochino, 1 Cojinete, 57 cm	1

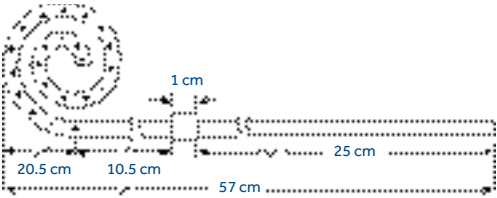


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8811313013	Catéter Cola de Cochino, 1 Cojinete, 60 cm	1
Kit	8817278010	Kit Catéter Cola de Cochino, 1 Cojinete, 60 cm	5

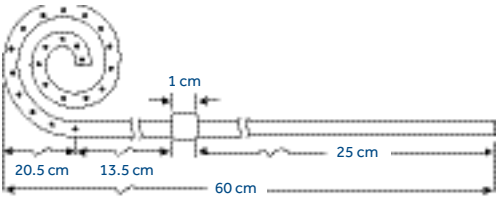


Catéteres Cola de Cochino- Dos Cojinetes


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8811313015	Catéter Cola de Cochino, 2 Cojinetes, 57 cm	1
Kit	8817278007	Kit Catéter Cola de Cochino, 2 Cojinetes, 57 cm	5

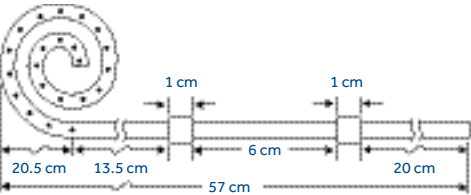

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8811313010	Catéter Cola de Cochino, 2 Cojinetes, 62 cm	1
Kit	8817278006	Kit Catéter Cola de Cochino, 2 Cojinetes, 62 cm	5

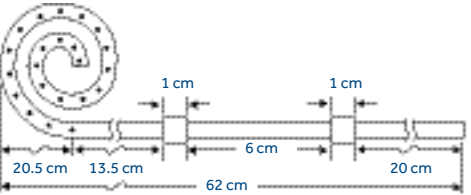

Catéteres Tenckhoff Cola de Cochino Pediátrico

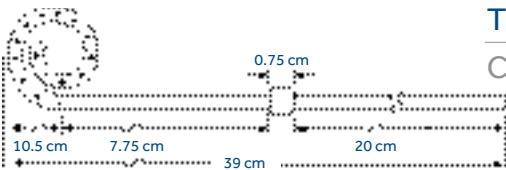


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
Catéter	8815677001	Cola de Cochino Pediátrico, 1 Cojinete Subcutáneo, 39 cm	1

Catéteres Peritoneales Cuello de Cisne Cola de Cochino Pediátricos




El Catéter Cuello de Cisne Cola de Cochino emplea el peso del espiral y el ángulo pre-formado para prevenir la migración interna. La sección externa del catéter es posicionado hacia abajo, para prevenir la acumulación de desechos celulares en el sitio de salida.
Indicación: Para pacientes con problemas de migración del catéter e incomodidad.


Catéteres Cuello de Cisne Cola de Cochino Pediátricos

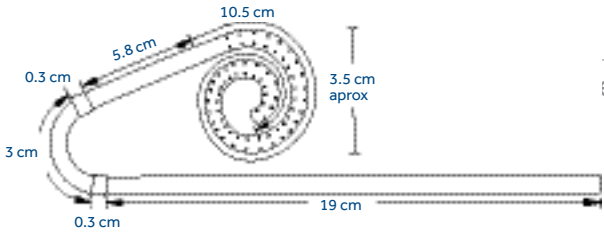


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888413100	Catéter Curl Cath Cuello de Cisne para infante, 2 Cojinetes, 38.9 cm	1

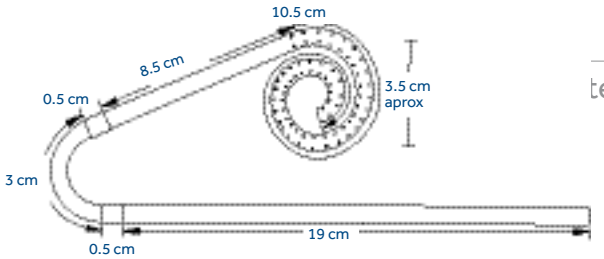

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888414813	Catéter Curl Cath Cuello de Cisne Pediátrico, 2 Cojinetes, Izq, 42 cm	1

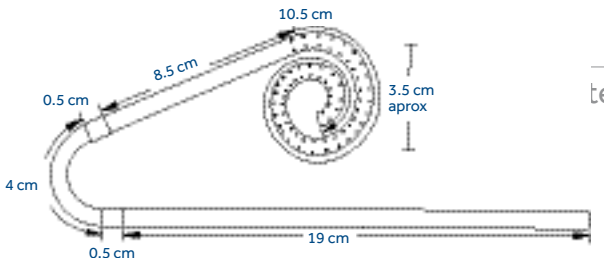

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888413101	Catéter Curl Cath Cuello de Cisne Pediátrico, 2 Cojinetes, 43 cm	1

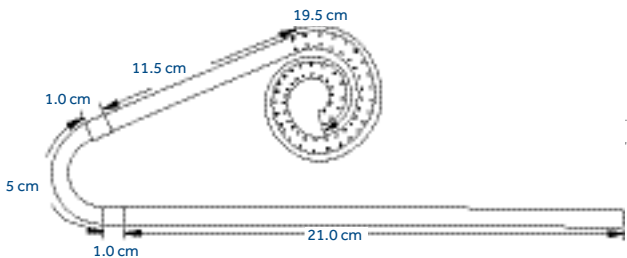

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888413102	Catéter Curl Cath Cuello de Cisne para Adolescente, 2 Cojinetes, 59 cm	1

Estilete para Enderezar Catéter Peritoneal

Los estiletes ayudan a mantener el catéter recto para maniobrar durante la inserción en el peritoneo. Los estiletes vienen en variedad de tamaños y pueden ser empleados para todos los tipos de catéteres. Son autoclavables.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888415646	Estilete de Inserción, 44.5 cm, para catéteres de 44.5 cm o más cortos	1
8888415661	Estilete de Inserción, 61 cm, para catéteres de 61 cm o más cortos	5



Estilete Tunelizador Faller

Este estilete es una alternativa para el estilete tunelizador atraumático. Tiene un borde de corte en la sección que va hacia el túnel y una sección barbada en el extremo opuesto que conecta al catéter.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888415679	Estilete Tunelizador Faller	1



Plantillas del catéter

Las plantillas se utilizan para proveer un contorno visible para los catéteres Cuello de Cisne antes de la colocación. Incluyen una adecuada posición en la pared abdominal y dos opciones para el sitio de salida para que los profesionales de la salud puedan seleccionar el sitio de salida más apropiado para cada paciente. Cada plantilla puede utilizarse para colocación tanto en el lado izquierdo como en el derecho.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888412304	Plantilla para catéter Tenckhoff Cuello de Cisne, 2 Cojinetes, Izq/Der	1



Adaptador de Titanio

Una alternativa al adaptador Tapa-Beta. Puede utilizarse con todos los catéteres peritoneales Argyle™.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8888415604	Adaptador de Titanio en Dos Partes	1



Set introductor

Los sets introductores se utilizan para la colocación percutánea del catéter peritoneal.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAJA
8815544010	Set introductor Pull-Apart 16Fr	5



Contenido Estéril:

- (1) 16 Fr Dilatador Pull-Apart
- (1) 18 ga Aguja Introductora
- (1) 12 mL Jeringa
- (1) J/Recto 0.038" Alambre Guía

† Fabricado con PoliTetra Fluoro Etileno (PTFE)



IMPORTANTE: consulte la información del envase para ver todas las instrucciones, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© 2016 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logo de Medtronic y Otros, son, en conjunto, marcas registradas de Medtronic.

Dirección: Insurgentes Sur 863, Piso 15 y 16,
Benito Juárez, Nápoles, 03810 Ciudad de México
Teléfono: 01 55 1102 9030
Número de aviso de publicidad: 173300202C1755

Medtronic